



VESTUARIO DESECHABLE PARA SALA LIMPIA



Albareda, 6-8 entlo.
Barcelona 08004
Tel.: +34 93 322 06 36
Fax: +34 93 441 65 90
Info@tiselab.com
www.tiselab.com

VENTAJAS

- ➡ **Productos compatibles con entorno ISO 5**, procesados y envasados en sala limpia ISO4.
- ➡ Amplia gama de **guantes (látex, nitrilo, vinilo y policloropreno)**, sin polvo, fabricados anatómicamente.
- ➡ Soluciones innovadoras:
 - **Flexibilidad sin alergias al látex**: nuevos guantes Pzero
 - Por fin **doble guante de nitrilo**: guantes Emerald.
 - **Vestuario desechable** de Clean-Tough™, compatible con salas ISO 4.
- ➡ Todos nuestros guantes cumplen con EN455 (partes 1, 2 y 3), EN374 (partes 1, 2 y 3) y ASTM D 3578-95.
- ➡ Fabricante acreditado bajo los estándares:
 - ISO 9001:2000
 - ISO 13488
 - Directiva 89/686/EEC
 - ISO 13485:2003
 - Directiva 93/42/EEC
 - ISO 14001:1996



Sala blanca ISO 4 - Nitritex




Guantes moldeados anatómicamente para mayor confort

GUANTES

TABLA RESUMEN

Material	Estéril / No Estéril	Longitud (mm)	Envasado	Ambidiestro / Específico	Marca	Referencia	Doble guante
Látex	Estéril	300 / 400 / 600	Individual	Específico (400 mm ambidextro)	BioClean	BELS, AL-300, BLAS, BLLS	
	Estéril	300	Individual	Específico	Profile	PLHS, PGHS	
	No Estéril	300	Caja	Ambidextro	BioClean	BLA-XP	
	No Estéril	240	Caja	Ambidextro	Evergreen	SENSA	
Policloropreno	Estéril	300	Individual	Específico	BioClean	BPZS, BUPS	
Nitrilo	Estéril	300 / 400	Individual	Específico	BioClean	BNHS, BNPS, BENS	
	No Estéril	300	Caja	Ambidextro	BioClean	BNPL	
	No Estéril	240	Caja	Ambidextro	Omega	OUTN	
Vinilo	No Estéril	240	Caja	Ambidextro	Profile	PVA	

**Todos los guantes están libres de polvo*

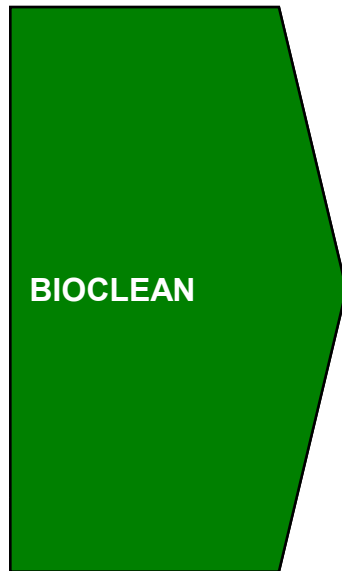

DESCRIPCIÓN

- **Guantes estériles**, procesados en sala limpia clase ISO 4.
- **Compatibles con entorno ISO 5.**
- Envasados individualmente en sobres de LDPE, para evitar el desprendimiento de partículas durante su apertura.
- Posibilidad de usar doble guante.
- Varias longitudes disponibles.
- Diseñados de forma anatómica.
- Disponibles en tallas de 6.0 a 9.0 en medias tallas, y talla 10.


MODELOS

- Elite: 300mm, guante interior
- Alpha: 300mm, guante exterior
- Extra: 400mm
- Maxima: 600mm



REFERENCIAS

- BELS
- AL-300
- BLAS
- BLLS

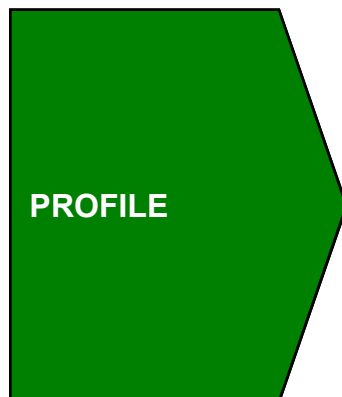


- **Guantes estériles, sin polvo.**
- Envasados individualmente.
- Longitud de 300mm.
- Disponibles con o sin gel.
- Disponibles en tallas de 6.0 a 9.0 en medias tallas.

- Profile 3000
- Profile 3000 Gel



- PLHS
- PGHS

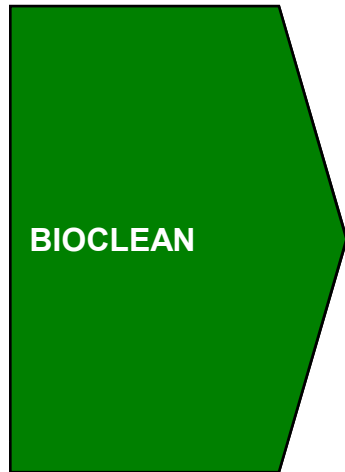

DESCRIPCIÓN

- **Guantes no estériles** para utilizar en zonas no críticas.
- Sin polvo.
- **Longitud de 300mm** para mayor protección en la muñeca.
- Diseñados de forma anatómica.
- Envasados en cajas de 100 unidades.
- Tallas disponibles: S, M, L, XL.


MODELOS

- BioClean XP



REFERENCIAS

- BLA-XP

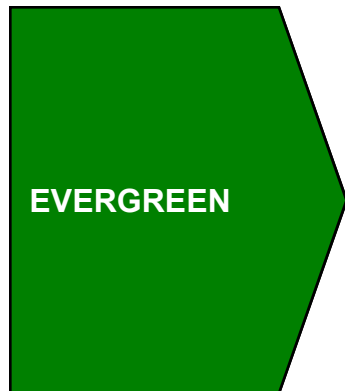


- **Guantes no estériles** para utilizar en zonas no críticas.
- Sin polvo.
- **240mm de longitud.**
- Envasados en cajas de 100 unidades.
- Tallas disponibles: XS, S, M, L, XL.

- Sensa



- EPF 21

POLICLOROPRENO (NITRILO+NEOPRENO)

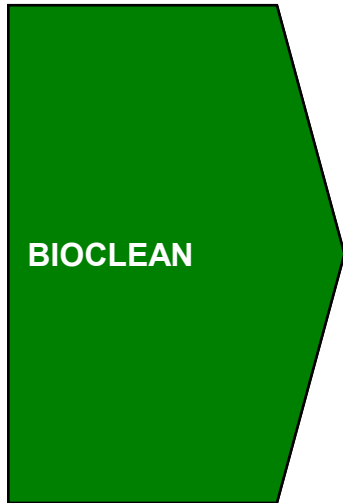

DESCRIPCIÓN

- Guantes **estériles**, procesados en sala ISO 4.
- Adecuados para trabajar en **salas ISO 5**.
- 100% libres de látex, por lo que no hay riesgo de alergias.
- Combinan una mayor resistencia que el látex con una mayor flexibilidad que el nitrilo.
- Envasados individualmente en sobres de LDPE, para evitar el desprendimiento de partículas durante su apertura.
- 300mm de longitud.

MODELOS

- **PZERO**: para utilizar como único guante.
- **ULTIMATE**: para utilizar como guante exterior, combinado con BioClean Emerald como guante interior.

REFERENCIAS

- BPZS
- BUPS





¡Llegó la alternativa al nitrilo!

FLEXIBILIDAD SIN ALERGIAS

Los guantes BioClean Pzero han sido fabricados a partir de un material sintético similar al látex, pero sin las proteínas de éste. De esta manera se elimina totalmente el riesgo a reacciones alérgicas. Los guantes de polichloropreno combinan una gran resistencia con una buena flexibilidad, mejorando el confort de los usuarios.

Ofrecen gran protección frente a productos citotóxicos.

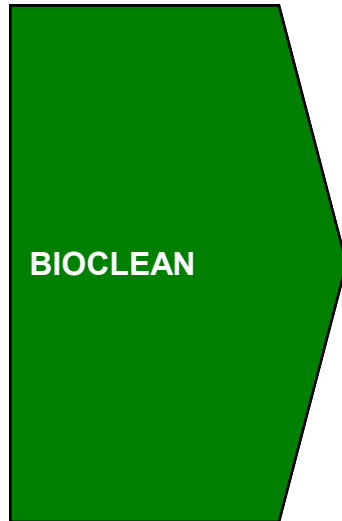

DESCRIPCIÓN	MODELOS	REFERENCIAS
<ul style="list-style-type: none">• Guantes estériles, procesados en sala ISO 4.• Adecuados para trabajar en salas ISO 5.• 100% libres de látex, por lo que no hay riesgo de alergias.• Disponibles en longitudes de 300 y 400mm.• Envasados individualmente.• Disponibles en tallas de 6.0 a 9.0 en medias tallas, y talla 10.• Fabricados de forma anatómica.	<ul style="list-style-type: none">• BioClean 100: 300mm• N-Plus: 400mm• Emerald: para utilizar como guante interior, combinado con BioClean Ultimate como guante exterior.	<ul style="list-style-type: none">• BNHS• BNPS• BENS 

Doble guante...¿de nitrilo?

BioClean Emerald


BioClean lanza al mercado el primer guante de nitrilo pensado exclusivamente para utilizarse como guante interior al llevar doble guante. Su superficie extremadamente lisa hace realmente fácil colocar un segundo par de guantes encima.

Su color verde permite detectar fácilmente posibles roturas en el guante exterior.

GUANTES

NITRILO NO ESTÉRIL

	DESCRIPCIÓN	MODELOS	REFERENCIAS
	<ul style="list-style-type: none">• Guantes no estériles para utilizar en zonas no críticas.• Sin polvo.• Longitud de 300mm para mayor protección en la muñeca.• Diseñados de forma anatómica.• Envasados en cajas de 100 unidades.• 6 tallas disponibles.• Color morado	<ul style="list-style-type: none">• BioClean 100 Nitrile 	<ul style="list-style-type: none">• BNPL
	<ul style="list-style-type: none">• Guantes no estériles para utilizar en zonas no críticas.• Sin polvo.• Nitrilo ultra fino• Longitud de 240 mm• Envasados en cajas de 100 unidades.• 6 tallas disponibles.• Color azul.• Recomendados para el sector alimentario.	<ul style="list-style-type: none">• Ultra Touch 	<ul style="list-style-type: none">• OUTN

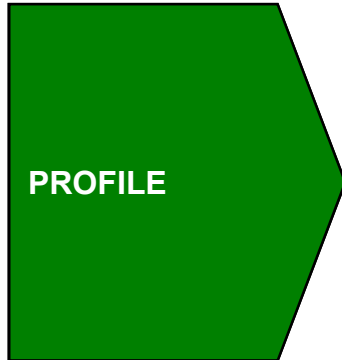

DESCRIPCIÓN

- Guantes no estériles, para zonas no críticas.
- Sin polvo.
- Longitud de 240mm.
- Envasados en cajas de 100 unidades.
- Tallas disponibles: S, M, L, XL.

MODELOS

- Profile 3000 vinyl




REFERENCIAS

- PVA

MASCARILLAS BIOCLEAN

- Fabricadas y envasadas en sala limpia clase ISO 4
- Compatibles con sala limpia clase ISO 4
- Dimensiones: 210mm de largo x 90mm de ancho (*más largas que las convencionales de 180mm para una mayor protección*)
- Color: blanco
- Modelos disponibles:
 - Mascarillas ear-loop (goma a la oreja), head-loop (goma a la cabeza) o tie-on (lazo). Estériles o no estériles.
 - Mascarillas con visor ear-loop o tie-on. Estériles.
 - Mascarillas “pouch style” (duckbill), con o sin velo. Estériles.
- Eficacia en la filtración de partículas superior al 96%.
- Eficacia en la filtración de bacterias superior al 94%.
- Envasadas en doble bolsa

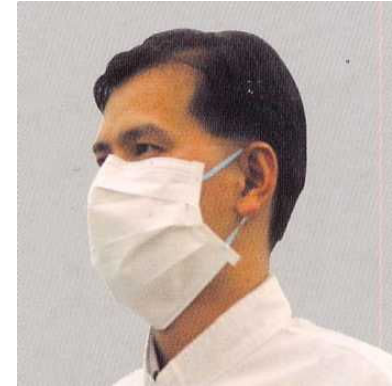

Mascarilla estándar







Mascarilla con visor




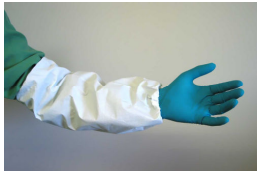


Mascarilla duckbill

VESTUARIO DESECHABLE

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIAS	IMAGEN
MONOS	<ul style="list-style-type: none">• Monos desechables, con o sin capucha, fabricados con el revolucionario material Clean-Tough™• Compatibles con clase ISO 4• Disponibles en versión estéril y no estéril, en 6 tallas diferentes• Envasados individualmente, en doble bolsa en el caso de los monos estériles	<ul style="list-style-type: none">• Con capucha: s-BDCH, BDCH• Sin capucha: s-BDCC, BDCC	
BATAS	<ul style="list-style-type: none">• Batas desechables fabricadas con el revolucionario material Clean- Tough™• Compatibles con clase ISO 4• Disponibles en 5 tallas diferentes, en versión estéril y no estéril	<ul style="list-style-type: none">• S-BDLC, BDLC	
CAPUCHAS	<ul style="list-style-type: none">• Fabricados con el material Clean- Tough™• Compatibles con clase ISO4• Con una goma elástica en la apertura de la cara para mejor confort• Disponibles en versión estéril y no estéril	<ul style="list-style-type: none">• S-BDHD, BDHD	
GORRITOS	<ul style="list-style-type: none">• Fabricados en polipropileno• Talla única• Color blanco	<ul style="list-style-type: none">• 4020	

VESTUARIO DESECHABLE

	DESCRIPCIÓN	REFERENCIAS	IMAGEN
CUBREZAPATOS	<ul style="list-style-type: none">• Cubrezapatos de polietileno• Buena resistencia: 75 micras de grosor• 41cm de longitud• 300 unidades / caja• Color blanco	<ul style="list-style-type: none">• S-261-B	
CUBREZAPATOS ANTIDESLIZANTES	<ul style="list-style-type: none">• Fabricados en polipropileno e impregnados de un revolucionario elastómero• Excelente resistencia y durabilidad para un uso prolongado• Su superficie antideslizante reduce el riesgo de caídas accidentales• No desprende partículas, por lo que el uso es apropiado en Salas Limpias• Longitudes de 16" y 18" que se adaptan a todos los usuarios• Envasados en doble bolsa para usar en Salas Limpias	<ul style="list-style-type: none">• NSO016/NSO018	
CUBREBOTAS	<ul style="list-style-type: none">• Fabricados con el material Clean- Tough™• Compatibles con clase ISO 4• Suela antideslizante• Talla universal: 400mm• Disponibles en versión estéril y no estéril	<ul style="list-style-type: none">• S-BDOB, BDOB	
MANGUITOS	<ul style="list-style-type: none">• Fabricados con el material Clean- Tough™• Compatibles con clase ISO 4• Talla universal• Disponibles en versión estéril y no estéril	<ul style="list-style-type: none">• S-BDSC, BDSC	

ALFOMBRILLAS DE ACCESO

- Alfombrillas para prevenir la entrada de contaminación y partículas en zonas limpias, formadas por 30 láminas adhesivas
- Cada hoja está recubierta de una sustancia adhesiva y antibacteriana
- Todas las hojas están numeradas para facilitar su identificación
- Referencias: STBXXX, STWXXX
- Tamaños: 45x115cm, 66x115cm, 92x115cm
- Colores: blanco o azul

